




ALBAclone®


Anti-S

KAN GRUPLAMA REAKTİFİ
Monoklonal / İndirekt Aglutinin

REF Z182

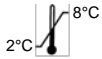

IVD

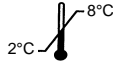

Saklama sıcaklığı sınırlaması (2°C - 8°C)

IVD

In vitro tanı amaçlı tıbbi cihaz



Kullanım talimatlarına bakın

www.quotientbd.com



Üretici

REF

Ürün Kodu

KULLANIM AMACI

Anti-S reaktifi, dolaylı aglutinasyon yoluyla insan S pozitif kırmızı kan hücrelerinin *in vitro* tanısı ve tespitine yöneliktir.

REAKTİF AÇIKLAMASI

Bu reaktifin ana bileşeni P3S13JS123 kodlu IgG salgılayan *in vitro* kültürlenmiş insan/fare heterohibridomasından elde edilir.

Seyreltilmiş formülasyonu, BSA ve $\leq 0,1$ sodyum azit içerir. Reaktif damlatma şişesi ile verilen hacim yaklaşık 40 µl'dir; bu husus göz önünde bulundurularak tüm test sistemlerinde uygun serum-hücre oranlarının korunduğundan emin olunmalıdır.

Bu reaktif, *in vitro* Tanı Amaçlı Tıbbi Cihazlara ilişkin 98/79/AT sayılı Direktif gerekliliklerine ve Birleşik Krallık'taki Kan Transfüzyonu Hizmetleri Kılavuzunda yer alan önerilere uygundur.

SAKLAMA KOŞULLARI

Reaktif 2°C - 8°C'de saklanmalıdır. Bulanık ise kullanmayın. Seyreltmeyin. Reaktif, ürün etiketinde belirtilen son kullanma tarihine kadar stabildir.

KULLANIM VE İMHA ÖNLEMLERİ

Bu reaktif $\leq 0,1$ sodyum azit içerir. Sodyum azit kurşun ve bakır tesisatla reaksiyona girerek patlayıcı bileşikler oluşturabilir. Lavaboya döküldüğünde azit birikmesini önlemek için bol miktarda suyla yıkayın.

Su yaşamına zararlıdır ve etkileri uzun sürelidir. Çevreye atılmadan kaçının. İçerikleri/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası düzenlemelere uygun olarak atın.

DIKKAT: BU ÜRÜNÜN TÜRETİLDİĞİ KAYNAK MADDEİN HBsAg, ANTI-HIV 1/2 VE ANTI-HCV İÇİN REAKTİF OLMADIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR. BİLİNEN HİÇBİR TEST YÖNEMİ İNSAN KANINDAN TÜRETİLEN ÜRÜNLERİN

BULAŞICI HASTALIK TAŞIMAYACAĞINA DAİR GÜVENCE VEREMEZ. BU ÜRÜNÜN KULLANIMI VE İMHASINA GEREKEN ÖZEN GÖSTERİLMELİDİR.

Bu reaktif yalnızca *in vitro* profesyonel kullanım içindir

NUMUNE TOPLAMA VE HAZIRLAMA

Numuneler antikoagülan ile veya antikoagülan olmadan aseptik teknikle alınmalıdır. Numune alındıktan sonra mümkün olan en kısa sürede test edilmelidir. Test gecikirse numune, 2°C - 8°C'de saklanmalıdır. Ciddi derecede hemoliz veya kontaminasyonu olan kan numuneleri kullanılmamalıdır. Pıhtılaşan numuneler veya EDTA'da toplanan numuneler alındıktan sonraki yedi gün içinde test edilmelidir. Sitrat antikoagülünde saklanan başışçı kanı, son başış tarihine kadar test edilebilir.

TEST PROSEDÜRLERİ

Bu reaktif, aşağıda açıklanan teknikle kullanım için standartlaştırılmıştır ve bu nedenle diğer tekniklerle kullanıma uygunluğu garanti edilemez.

GEREKİLİ EK MATERYALLER VE REAKTİFLER

- PBS pH 7,0 ± 0,2
- LISS
- Anti-S kontrolüne uygun reaktif kırmızı kan hücreleri
- Polispesifik anti-insan globulin reaktifi
- 12 x 75 mm cam test tüpü
- Pipetler
- Santrifüj

ÖNERİLEN TEKNİK

LISS, 37°C İndirekt Antiglobulin

- 1 hacim kan gruplama reaktifini 12 x 75 mm cam test tüpüne ekleyin.
- LISS'de %5'e süspanse edilmiş 1 hacim hücre ekleyin.
- Testi iyice karıştırın ve 37°C'de 10 dakika inkübe edin.
- Testi 4 kez bol miktarda PBS pH 7,0 ± 0,2 ile yıkayın (ör. 12 x 75 mm tüp başına 4 ml PBS).

NOT: (i) Kırmızı hücreleri çöktirmek için yeterli çevirme süresi tanıyın.

(ii) "Kuru" bir hücre peleti elde etmek için her yıkamanın sonunda kalan salının büyük bir bölümünün atıldığından emin olun.

- Her tüpe iki damla polispesifik anti-insan globulin reaktifi ekleyin.
- İyice karıştırın.
- 1000 g'de 10 saniye boyunca veya uygun bir alternatif g kuvveti ve süreyle santrifüleyin.
- Hücre peletini yeniden oynatmak için tüpü alttan hafifçe sallayın ve aglutinasyon olup olmadığını makroskopik olarak gözlemleyin.

SONUÇLARIN YORUMLANMASI

Aglütinasyon var = pozitif test sonucu
Aglütinasyon yok = negatif test sonucu

GİRİŞ

Anti-S ve anti-s sırasıyla 1947 ve 1951'de tanımlanmıştır ve 4. kromozomun uzun kolu üzerinde bir çift aleli tayin eder. S/s lokusu M/N lokusuna yakından bağlıdır ve sonuç olarak, Rhesus Sistemindeki CDE antijenleri gibi MNS genetik katkısı her bir ebeveynden haplotip olarak (ör. MS, NS vb.) kalıtıma dahil olur.

Ss antijenleri, bir kırmızı kan hücresi glikoproteini olan glikoforin B üzerinde taşınır ve burada 29. konumda tek bir aminoasit ikamesi ile karakterize edilirler. Metionin, S antijen ekspresyonundan, treonin ise s antijen ekspresyonundan sorumludur.

Ss antijenleri genellikle kırmızı kan hücreleri papaine, bromeline veya fisine maruz kaldığında yok edilir. Tripsin genel olarak advers bir etkiye sahip değildir.

S-s fenotipi, beyazlarda son derece nadirdir ancak Amerikalı siyahların yaklaşık %1,5'inde görülür. MNS sistemindeki karmaşıklıklar, S/s ekspresyonunun değiştirilebileceği bir dizi fenotip de üretir.

ETİKET SİMGELERİNİN YORUMLANMASI

LOT

Seri kodu



Son kullanma tarihi (YYYY-AA-GG)

KALİTE KONTROL

Reaktiflerin kalite kontrolü çok önemlidir ve her bir grup serisiyle ve tekli gruplarla gerçekleştirilmelidir. Minimum olarak pozitif ve negatif bir kontrol kullanılmalıdır.

Ss kırmızı kan hücreleri pozitif kontrol olarak kullanılmalıdır
ss kırmızı kan hücreleri negatif kontrol olarak kullanılmalıdır

PERFORMANS SINIRLAMALARI

Tüp testleri bir "yan yatırıp yuvarlama" prosedürü ile okunmalıdır. Aşırı çalkalama, zayıf aglütinasyonu bozabilir ve yanlış negatif sonuçlar doğurabilir.

Tüp testlerinde santrifüjleme sırasında önerilen g kuvvetinin kullanılması önemlidir çünkü aşırı santrifüj hücre peletinin resüspanse edilmesini zorlaştırabilir, yetersiz santrifüj ise kolayca dağılan aglütinatlara neden olabilir.

Bazı kırmızı kan hücresi antijenlerinin ekspresyonu, özellikle EDTA'lı ve pıhtılaşmış numunelerde saklama sırasında güç bakımından azalabilir. Taze numunelerle daha iyi sonuçlar elde edilir.

Direkt antglobulin testi pozitif numuneleri, S durumlarından bağımsız olarak indirekt antglobulin testi ile reaksiyona girer.

Test materyallerinin kontaminasyonu, yanlış reaksiyon sıcaklığı, materyallerin uygun olmayan şekillerde saklanması ve eksik test reaktifleri ve bazı hastalık durumları nedeniyle yanlış pozitif veya yanlış negatif sonuçlar doğurabilir.

Birleşik Krallık yinelenme aralıkları: SS %11; SS %44; ss %45

YAYIN TARİHİ

2022-08

Daha fazla bilgi veya tavsiye için lütfen yerel distribütörünüzle iletişime geçin.



Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



Alba Bioscience Limited
James Hamilton Way,
Penicuik,
EH26 0BF, UK

Tel No: +44 (0) 131 357 3333

Faks No: +44 (0) 131 445 7125

E-posta: customer.serviceEU@quotientbd.com