




# ALBAcheck® - BGS Reagent Control for Anti-D

REF Z271

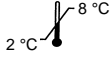

IVD

CE  
1434


## ETİKET SİMGELERİNİN YORUMLANMASI

LOT

Seri kodu



Son kullanma tarihi (YYYY-AA-GG)

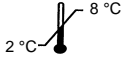

Saklama sıcaklığı sınırlaması  
(2°C - 8°C)

IVD

*In vitro* tanı amaçlı tıbbi cihaz



Kullanım talimatlarına bakın

www.quotientbd.com



Üretici

REF

Ürün Kodu

## GİRİŞ

Bazı monoklonal Anti-D reaktifleri kullanım için güçlendirildiğinden bir kontrol reaktifi kullanılması gereklidir.

Bu reaktif, aşağıda belirtilen Quotient Anti-D ürünleriyle birlikte negatif kontrol olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır: Z031, Z039, Z041.

## KULLANIM AMACI

ALBAcheck®-BGS Reagent Control for Anti-D, Quotient monoklonal Anti-D reaktifleriyle birlikte negatif kontrol olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

## REAKTİF AÇIKLAMASI

Bu reaktif, Quotient monoklonal Anti-D reaktiflerine benzer şekilde formüle edilmiştir (Ürün No: Z031, Z039, Z041). Reaktif ayrıca EDTA ve 1 g/L sodyum azit içerir.

Reaktif damlatma şişesi ile verilen hacim yaklaşık 40 µL'dir; bu husus göz önünde bulundurularak tüm test sistemlerinde uygun serum-hücre oranlarının korunduğundan emin olunmalıdır.

Bu reaktif, *in vitro* Tanı Amaçlı Tıbbi Cihazlara ilişkin 98/79/AT sayılı Direktif gerekliliklerine ve Birleşik Krallık'taki Kan Transfüzyonu Hizmetleri Kılavuzunda yer alan önerilere uygundur.

## SAKLAMA KOŞULLARI

Reaktif 2-8°C'de saklanmalıdır. Bulanık ise kullanmayın. Seyreltmeyin. Reaktif, ürün etiketinde belirtilen son kullanma tarihine kadar stabildir.

## KULLANIM VE İMHA ÖNLEMLERİ

Bu reaktif %0,1 sodyum azit içerir.

Sodyum azit kurşun ve bakır tesisatla reaksiyona girerek patlayıcı bileşikler oluşturabilir. Lavaboya döküldüğünde azit birikmesini önlemek için bol miktarda suyla durulayın.

Su yaşamına zararlıdır ve etkileri uzun sürelidir. Çevreye atmaktan kaçının. İçerikleri / kabı yerel / bölgesel / ulusal / uluslararası düzenlemelere uygun olarak atın.

Bu reaktif yalnızca *in vitro* profesyonel kullanım içindir.

## TEST PROSEDÜRLERİ

### Genel Bilgiler

ALBAcheck®-BGS Reagent Control for Anti-D, kontrol edilen monoklonal Anti-D reaktifinin yerine ve onun için önerilen tekniklere göre kullanılmalıdır.

## KALİTE KONTROL

Bu bir kalite kontrol reaktifidir ve önerilen tekniklerle kullanıldığında tatmin edici performansı yeterli kontrol seviyesini gösterir.

## ÖZEL PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

Performans değerlendirme çalışmalarında ALBAcheck®-BGS Reagent Control for Anti-D, iyi karakterize edilmiş alyuvarlara karşı test edilmiştir.

ALBAcheck®-BGS Reagent Control for Anti-D performansı, beklenen test sonuçlarıyla %100 uyum göstermiştir.

## PERFORMANS SINIRLAMALARI

Test materyallerinin kontaminasyonu, yanlış reaksiyon sıcaklığı, materyallerin uygun olmayan şekillerde saklanması ve eksik test reaktifleri nedeniyle yanlış pozitif veya yanlış negatif sonuçlar doğurabilir.

## YAYIN TARİHİ

2022-12

Daha fazla bilgi veya tavsiye için lütfen yerel distribütörünüzle iletişime geçin.

EC REP

**Emergo Europe B.V.**  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



Alba Bioscience Limited  
James Hamilton Way  
Penicuik  
EH26 0BF, UK

Tel No: +44 (0) 131 357 3333  
Faks No: +44 (0) 131 445 7125  
E-posta: [customer.serviceEU@quotientbd.com](mailto:customer.serviceEU@quotientbd.com)

© Alba Bioscience Limited 2022

Z271PI/TR/07