




## ALBAcheck® - BGS AB Serum (humaan)

**REF** Z281

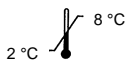

**IVD**



### INTERPRETATIE VAN LABELSYMBOLLEN

**LOT**

Batchcode



Houdbaar tot (JJJJ-MM-DD)



Opslagtemperatuurlimiet (2-8 °C)

**IVD**

Medisch hulpmiddel voor *in-vitro*diagnostiek



Raadpleeg de gebruiksaanwijzing

[www.quotientbd.com](http://www.quotientbd.com)



Fabrikant

**REF**

Productcode

### INLEIDING

AB Serum heeft diverse toepassingen in de bloedgroeps-serologie. Dit product kan worden gebruikt als verdunner in bepaalde procedures of als inerte controle.

### BEOOGD DOEL

ALBAcheck®-BGS AB Serum is bestemd voor gebruik als verdunner of inerte controle voor immunohematologistests.

### BESCHRIJVING REAGENS

Dit reagens is bereid uit plasma dat is afgenomen bij bloeddonoren. Conversie naar serum werd bereikt door toevoeging van calciumchloride en, waar nodig, trombine. Overmatig calcium werd verwijderd door toevoeging van natriumoxalaat. De samenstelling bevat ook 1 g/l natriumazide.

Het volume dat door de reagensdruppelfles wordt geleverd is ongeveer 40 µl; houd hier rekening mee zodat in alle testsystemen de juiste serum-celverhoudingen worden gebruikt.

Dit reagens voldoet aan de vereisten van Richtlijn 98/79/EG betreffende medische hulpmiddelen voor *in-vitro*diagnostiek en de aanbevelingen in de Guidelines for Blood Transfusion Services in the United Kingdom (richtlijnen voor bloedtransfusiediensten in het Verenigd Koninkrijk).

### OPSLAGCONDITIES

Het reagens moet worden bewaard bij 2-8 °C. Niet gebruiken als het troebel is. Niet verdunnen. Het reagens is stabiel tot de uiterste houdbaarheidsdatum die op het productlabel staat vermeld.

### VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK EN AFVOER

Dit reagens bevat 0,1% natriumazide. Natriumazide kan reageren met loden en koperen leidingen en explosieve verbindingen vormen. Als u het in de gootsteen giet, spoel het dan door met een grote hoeveelheid water om ophoping van azide te voorkomen.

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Voorkom lozing in het milieu. Voer de inhoud/container af in overeenstemming met de lokale/regionale/nationale/internationale voorschriften.

PAS OP: BRONMATERIAAL WAARVAN DIT PRODUCT IS AFGELEID, IS NIET-REACTIEF VOOR HBsAg, ANTI-HIV 1/2 EN ANTI-HCV. GEEN ENKELE TESTMETHODE KAN GARANDEREN DAT PRODUCTEN DIE ZIJN AFGELEID VAN HUMAAN BLOED GEEN BESMETTELIJKE ZIEKTE KUNNEN OVERDRAGEN. WEES VOORZICHTIG BIJ HET GEBRUIK EN DE AFVOER VAN DIT PRODUCT.

Dit reagens is uitsluitend bedoeld voor professioneel *in-vitro*gebruik.

### TESTPROCEDURES

#### Algemene informatie

AB Serum heeft diverse toepassingen in de bloedgroeps-serologie. Gebruikers wordt geadviseerd om de geschiktheid van reagentia zorgvuldig te controleren vóór gebruik in specifieke procedures.

### SPECIFIEKE PRESTATIEKENMERKEN

In prestatiebeoordelingsonderzoeken werd ALBAcheck®-BGS AB Serum getest tegen goed gekarakteriseerde erythrocyten van commerciële panelen. Uit de prestaties van ALBAcheck®-BGS AB Serum bleek 100% overeenstemming met de verwachte testresultaten.


### PRESTATIEBEPERKINGEN

Vals-positieve of vals-negatieve resultaten kunnen optreden als gevolg van contaminatie van testmaterialen, onjuiste reactietemperaturen, onjuiste opslag van materialen en het weglaten van testreagentia.

### DATUM VAN UITGIFTE

2022-11

Neem voor meer informatie of advies contact op met uw plaatselijke distributeur.

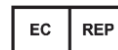

**Emergo Europe B.V.**  
Prinsessegracht 20  
2514 AP Den Haag  
The Netherlands



Alba Bioscience Limited,  
James Hamilton Way,  
Penicuik, EH26 0BF,  
VK

Tel.nr.: +44 (0) 131 357 3333  
Faxnr.: +44 (0) 131 445 7125  
E-mailadres: [customer.serviceEU@quotientbd.com](mailto:customer.serviceEU@quotientbd.com)

© Alba Bioscience 2022

Z281PI/NL/08