




## ALBAcheck® - BGS AB Serum (İnsan)

**REF** Z281

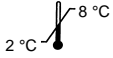

**IVD**



1434


### ETİKET SİMGELERİNİN YORUMLANMASI

**LOT**

Seri kodu



Son kullanma tarihi (YYYY-AA-GG)

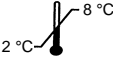

Saklama sıcaklığı sınırlaması (2°C - 8°C)

**IVD**

*In vitro* tanı amaçlı tıbbi cihaz



Kullanım talimatlarına bakın

[www.quotientbd.com](http://www.quotientbd.com)



Üretici

**REF**

Ürün Kodu

### GİRİŞ

AB Serum, kan grubu serolojisinde çeşitli uygulamalara sahiptir. Bu ürün, belirli prosedürlerde seyreltici olarak veya inert kontrol olarak kullanılabilir.

### KULLANIM AMACI

ALBAcheck®-BGS AB Serum, immünohematolojide seyreltici veya inert kontrol olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

### REAKTİF AÇIKLAMASI

Bu reaktif kan bağışçılarında toplanan plazmadan hazırlanır. Serumla dönüştürme işlemi kalsiyum klorür eklenerek ve gerektiğinde trombin kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Kalsiyum fazlası, sodyum oksalat eklenerek yok edilmiştir. Formülasyonu ayrıca 1 g/L sodyum azit de içerir.

Reaktif damlatma şişesi ile verilen hacim yaklaşık 40 µl'dir; bu husus göz önünde bulundurularak tüm test sistemlerinde uygun serum-hücre oranlarının korunduğundan emin olunmalıdır.

Bu reaktif, *in vitro* Tanı Amaçlı Tıbbi Cihazlara ilişkin 98/79/AT sayılı Direktif gerekliliklerine ve Birleşik Krallık'taki Kan Transfüzyonu Hizmetleri Kılavuzunda yer alan önerilere uygundur.

### SAKLAMA KOŞULLARI

Reaktif 2-8°C'de saklanmalıdır. Bulanık ise kullanmayın. Seyreltmeyin. Reaktif, ürün etiketinde belirtilen son kullanma tarihine kadar stabildir.

### KULLANIM VE İMHA ÖNEMLERİ

Bu reaktif %0,1 sodyum azit içerir. Sodyum azit kurşun ve bakır tesisatla reaksiyona girerek patlayıcı bileşikler oluşturabilir. Lavaboya döküldüğünde azit birikmesini önlemek için bol miktarda suyla durulayın.

Su yaşamına zararlıdır ve etkileri uzun sürelidir. Çevreye atılmaktan kaçının. İçerikleri / kabı yerel / bölgesel / ulusal / uluslararası düzenlemelere uygun olarak atın.

**DİKKAT: BU ÜRÜNÜN TÜRETİLDİĞİ KAYNAK MADDENİN HBsAg, ANTI-HIV 1/2 VE ANTI-HCV İÇİN REAKTİF OLMADIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR. BİLİNEN HİÇBİR TEST YÖNTEMİ İNSAN KANINDAN TÜRETİLEN ÜRÜNLERİN BULAĞIÇI HASTALIK TAŞIMAYACAĞINA DAİR GÜVENCE VEREMEZ. BU ÜRÜNÜN KULLANIMI VE İMHASINA GEREKEN ÖZEN GÖSTERİLMELİDİR.**

Bu reaktif yalnızca *in vitro* profesyonel kullanım içindir.

### TEST PROSEDÜRLERİ

#### Genel Bilgiler

AB Serum, kan grubu serolojisinde çeşitli uygulamalara sahiptir. Kullanıcıların özel prosedürlerde kullanmadan önce reaktif uygunluğunu dikkatli bir şekilde doğrulamaları önerilir.

### ÖZEL PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

Performans değerlendirme çalışmalarında ALBAcheck®-BGS AB Serum, ticari panellerden alınan iyi karakterize edilmiş alyuvarlara karşı test edilmiştir. ALBAcheck®-BGS AB Serum performansı beklenen test sonuçlarıyla %100 uyum göstermiştir.

### PERFORMANS SINIRLAMALARI

Test materyallerinin kontaminasyonu, yanlış reaksiyon sıcaklığı, materyallerin uygun olmayan şekillerde saklanması ve eksik test reaktifleri nedeniyle yanlış pozitif veya yanlış negatif sonuçlar doğurabilir.

### YAYIN TARİHİ

2022-11

Daha fazla bilgi veya tavsiye için lütfen yerel distribütörünüzle iletişime geçin.



**Emergo Europe B.V.**  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



Alba Bioscience Limited,  
James Hamilton Way,  
Penicuik, EH26 0BF,  
UK

Tel No: +44 (0) 131 357 3333  
Faks No: +44 (0) 131 445 7125  
E-posta: [customer.serviceEU@quotientbd.com](mailto:customer.serviceEU@quotientbd.com)

© Alba Bioscience 2022

Z281PI/TR/08