



# QUOTIENT

## ALBAcyte®

### A<sub>1</sub> Cells

## RÖDA BLODKROPPAR I REAGENS FÖR SERUMGRUPPERING

**REF** Z401



1434


### FÖRKLARING AV MÄRKNINGSSYMBOLER



Tillverkningsplatskod



Utgångsdatum (ÅÅÅÅ-MM-DD)

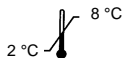

Temperaturgränser för förvaring (2–8 °C)

**IVD**

Medicinteknisk produkt för *in vitro*-diagnostik

**REF**

Produktkod



Se bruksanvisningen

[www.quotientbd.com](http://www.quotientbd.com)



Tillverkare

### AVSETT ÄNDAMÅL

Dessa röda blodkroppar i reagens är avsedda för AB0-serumgruppering av serum/plasma från patienter eller givare.

### INLEDNING

AB0-blodgruppering utförs i allmänhet genom att röda blodkroppar testas med Anti-A och Anti-B (många laboratorier testar även med Anti-A,B). A<sub>1</sub>-, A<sub>2</sub>-, B- och 0-celler ska användas för att kontrollera varje tillverkningsplats av tester och enstaka tester. Bekräftelse av gruppen av röda blodkroppar erhålls normalt genom att man samtidigt utför en serumgruppering, dvs. testar givarens eller mottagarens serum/plasma med röda blodkroppar i reagens av grupperna A<sub>1</sub> och B.

### REAGENSBeskrivning

Dessa röda blodkroppar i reagens presenteras som en 2–3 % suspension av poolade tvättade röda blodkroppar i modifierad Alsevers lösning. Rh-fenotypen för röda blodkroppar av A<sub>1</sub>-typ är ccdee. Konserveringslösningen har tagits fram speciellt för

att bevara röda blodkroppars integritet och antigenicitet och innehåller följande komponenter: trinitiumcitrat, citronsyra, dextros, inosin, neomycinsulfat (0,103 g/l) och kloramfenikol (0,349 g/l). Dessa röda blodkroppar i reagens kan användas direkt ur flaskan eller tvättas och resuspenderas före användning till 2–3 % i PBS eller 1,5–2 % i LISS. Röda blodkroppar i reagens som behandlats på detta sätt måste kasseras senast 24 timmar efter beredningen. Överföring av dessa röda blodkroppar i reagens till en annan behållare rekommenderas inte. När användaren ändrar reagenset på något sätt, t.ex. bereder LISS-cellsuspensioner, är hen ansvarig för att säkerställa styrkan hos suspensionen av röda blodkroppar, kvaliteten på PBS eller LISS som används och upprättandet samt lagringen av relevant dokumentation. Volymen som tillförs med reagensdroppflaskan är cirka 40 µl. Med det i åtanke ska du se till att lämpliga serum:cellförhållanden upprätthålls i alla testsystem.

**Detta reagens uppfyller kraven i direktiv 98/79/EG om medicintekniska produkter för *in vitro*-diagnostik och rekommendationerna i riktlinjerna för Blodtransfusionstjänsterna i Förenade kungariket.**

### FÖRVARINGSFÖRHÅLLANDEN

Reagenset ska förvaras i 2–8 °C. Det får inte frysas. Använd inte produkten om den är uppenbart missfärgad eller hemolyserad. Produkten får inte användas efter det angivna utgångsdatumet.

### FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID ANVÄNDNING OCH KASSERING

Källmaterialet som den här produkten har härletts från har befunnits vara icke-reaktivt för HBsAg, Anti-HIV 1/2 och Anti-HCV.

**Ingen känd testmetod kan garantera att produkter som har härletts från humant blod inte överför smittsamma sjukdomar. Därför ska lämplig försiktighet iaktas vid användning och kassering av denna produkt.**

Kloramfenikol klassificeras som karcinogent, och neomycinsulfat klassificeras som irriterande.

Detta reagens är endast avsett för yrkesmässig *in vitro*-användning.

### PROVTAGNING OCH -BEREDNING

Prover ska tas med aseptisk teknik. Provet ska testas så snart som möjligt efter provtagningen. Om testningen fördröjs ska provet förvaras i 2–8 °C i högst 48 timmar. Blodprover som uppvisar kraftig hemolys eller kontaminering ska inte användas.

### TESTFÖRFARANDE

Inga specifika testförfaranden rekommenderas. Användare rekommenderas att noggrant validera förfarandena och bekräfta reagensets lämplighet före användning.

### PRESTANDABEGRÄNSNINGAR

Förekomst av oregelbundna antikroppar i serumet/plasman hos en patient/givare kan orsaka oväntad agglutination av dessa röda blodkroppar i reagens.

För prover som visar avvikande resultat ska patientens serum/plasma testas om med hens egna röda blodkroppar (autotest) och med röda blodkroppar i grupp 0 i rumstemperatur.

Viss förlust av antigen uttryck kan inträffa under den angivna hållbarhetstiden. Eftersom sådan förlust delvis bestäms av egenskaper hos enskilda blodgivningar eller givare som inte kan förutsägas eller kontrolleras måste de rekommenderade förvarings- och användningsförhållandena tillämpas strikt.

Falskt positiva eller falskt negativa resultat kan inträffa på grund av kontaminering av testmaterial, fel reaktionstemperatur, fel förvaring av material, utelämnande av testreagens och vissa sjukdomstillstånd.

### SPECIFIKA PRESTANDAEGNSKAPER

De röda blodkropparna i reagens har visat sig ha ett negativt direkt antiglobulintest, vilket tyder på att inga komponenter av humana IgG- eller C3-komplementkomponenter kan påvisas på cellytan.

### UTFÄRDANEDATUM

2022-07

Kontakta den lokala distributören om du vill ha mer information eller råd.



**Emergo Europe B.V.**  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



Alba Bioscience Limited  
James Hamilton Way  
Penicuik  
EH26 0BF  
UK

Tel.nr: +44 (0) 131 357 3333  
Fax.nr: +44 (0) 131 445 7125  
E-post: [customer.serviceEU@quotientbd.com](mailto:customer.serviceEU@quotientbd.com)

© Alba Bioscience 2022

Z401PI/SV/08